

Ladder Fix

創外固定器

X線透過性素材で視界クリア
軽量スリム設計でストレス軽減



Ladder Fix 創外固定器

Features


特長

■ 低侵襲治療

刺入したφ1.2mmのサスピンを体外で固定します。

■ 組立不要

緊急時のご使用に便利です。

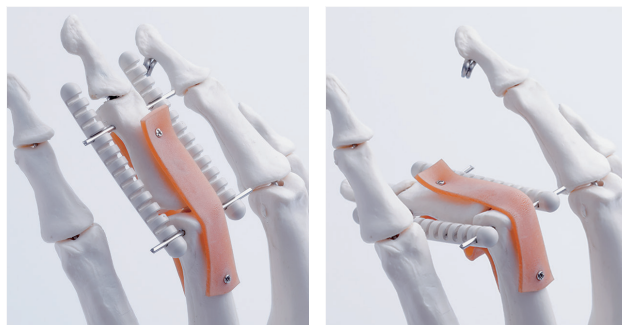

Material

マテリアル

■ X線透過・PEEK材使用


術中・術後に創外固定器を装着した状態で骨折部が確認できます。強度と着脱に適したしなやかさを持ち合わせています。

■ 軽量 (比重約 1.3 g/cm³)

金属使用の創外固定器と比較して軽量化実現。
(ステンレス比重約 8 g/cm³ チタン比重約 4.5 g/cm³)

■ 耐熱温度 260°C以上

オートクレーブ対応です。

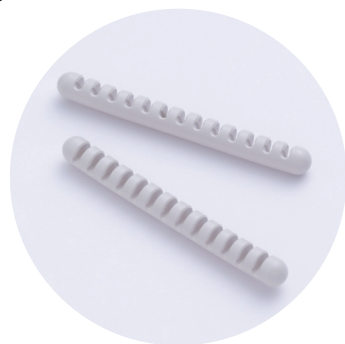

Design

デザイン


■ スリム設計でストレス軽減

太さ 4.5mm、長さ 44mm

■ 自由度の高い構造

固定用ホールは 13 個。3mm間隔で設置位置を自由に設定できます。

■ 左右共通タイプ

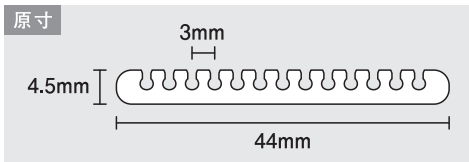

販売名：Ladder Fix 創外固定器

一般的名称：創外固定器

届出番号：18B1X10004000004

未滅菌

単回使用

適用：φ1.2mm サスピン

■ サスピン

SP3-112-100 サスピン φ1.2 × 100 mm

SP3-112-150 サスピン φ1.2 × 150 mm

販売名：サスピン

一般的名称：体内固定用ピン

承認番号：30600BZX0008800

材質：ステンレス鋼

未滅菌、単回使用、保険収載済



製造販売元
ヤマウチマテックスHD株式会社
〒918-8231 福井県福井市問屋町 2-22
TEL：0776-25-5600 <http://www.matex.co.jp>



お問い合わせ

y_med@matex.co.jp

仕様や外観等については、予告なしに変更する場合があります。

[CFHA]